

F&P Eson™ 2

NASALMASKE



Vertrauen fällt leicht bei Eson 2

F&P Eson 2 wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von Patienten und Schlaftherapeuten bei allen wichtigen Meilensteinen auf dem Weg der CPAP-Therapie zu erfüllen.

ÜBER
20 DESIGNVER-
BESSERUNGEN
IM VERGLEICH
ZU F&P ESON!



Vertrauen fällt leicht ... bei allen Meilensteinen der CPAP-Therapie

Um eine Maske zu verbessern, die für Leistung und Komfort entwickelt wurde, konzentrierte sich unser Entwicklungsteam auf die einfache Anwendung, damit Sie und Ihre Patienten jedem Schritt von der Titrierung bis zur Einhaltung der Therapie vertrauen können.

Weg der CPAP-Therapie

FÜR DEN SCHLAFTHERAPEUTEN

FÜR DEN PATIENTEN



1

SCHLAFUNTERSUCHUNG

Auswahl einer Nasalmaske zur Titrierung

F&P Eson 2 hat dieselbe RollFit™ Dichtungstechnologie wie F&P Eson, die für eine zuverlässige Dichtigkeit und weniger Leckagen entwickelt wurde.



2

ERSTER PATIENTENKONTAKT

Auswahl einer Maske für die häusliche Anwendung

Das intuitive Kopfband bietet Anpassungsmöglichkeiten für den Patienten, wie z. B. die Maske direkt über den Kopf zu ziehen.



3

SET UP

Anpassung und Demonstration der Maske

Blaue Markierungen – VisiBlue™, eingebettet in die Maske, bieten visuelle Anhaltspunkte für die einfachere, schnellere und intuitivere Maskenschulung.



4

ANWENDUNG

Patient beginnt mit der Anwendung der Maske

Das Design beruht u. a. auf der einfachen Anpassung und einfachen Anwendung; damit vermindert es die Anzahl möglicher Reklamationen und stärkt das Vertrauen des Patienten.




5

THERAPIETREUE

Langzeit-Therapietreue

Eson 2 wurde entwickelt, um nicht nur in der ersten Nacht zu funktionieren, sondern um die Chance eines langfristigen Therapieerfolgs zu erhöhen.

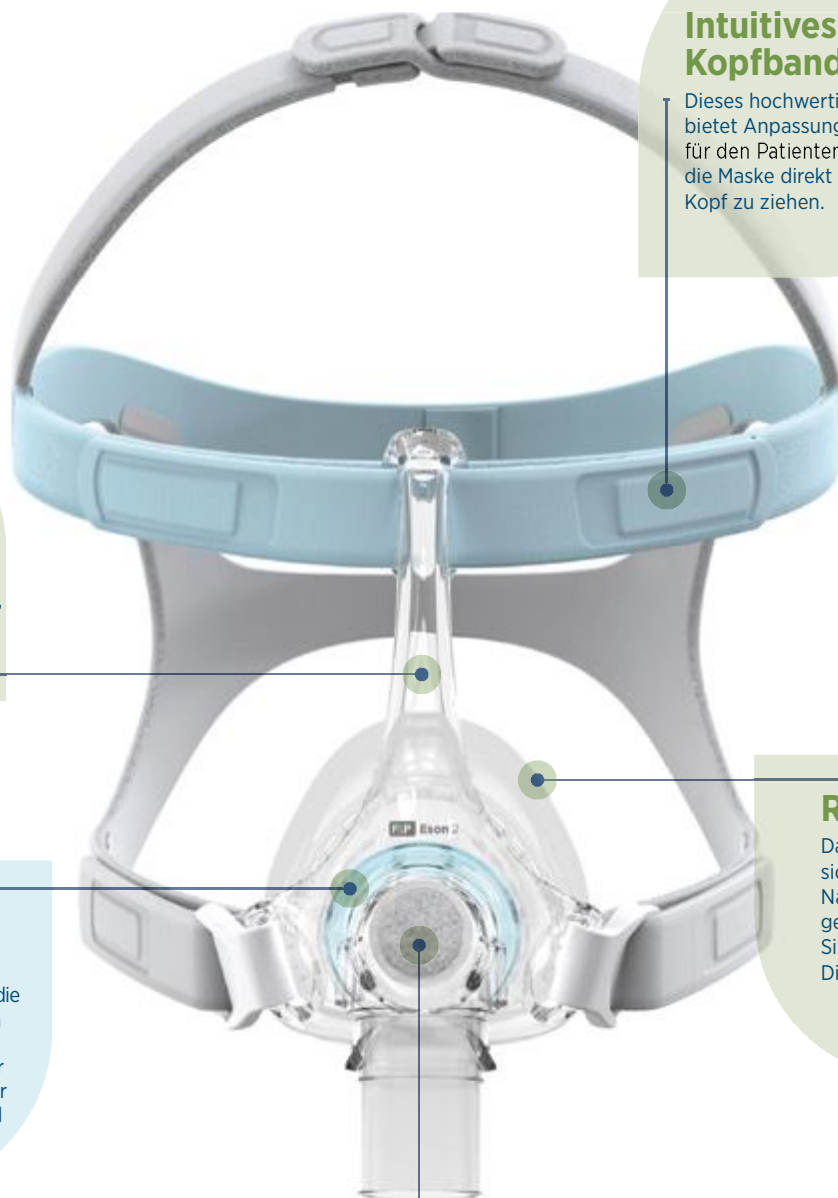

Intuitives Kopfband

Dieses hochwertige Kopfband bietet Anpassungsmöglichkeiten für den Patienten, wie z. B. die Maske direkt über den Kopf zu ziehen.

Easy Frame

Der Easy Frame – der auf alle drei Maskenkissen passt – hat nun ein schmaleres Profil. Dadurch bietet sich eine klarere Sicht, wobei die Stabilität der Dichtung erhalten bleibt.



VisiBlue™

Blaue Markierungen, die in die wesentlichen Komponenten der Maske eingebettet sind, helfen den Patienten bei der Anwendung der Maske, ihrer Ausrichtung, Zerlegung und dem Wiederaufbau.

RollFit Seal

Das RollFit Seal, das sich automatisch dem Nasenrücken anpasst, gewährleistet präzisen Sitz und zuverlässige Dichtigkeit.

Waschbarer Luftverteiler

Der innovative Luftverteiler, der Geräusche und Luftzug reduziert, ist jetzt waschbar und haltbarer.

Anpassen der Eson 2



Halten Sie die unteren Bänder des Kopfbands so, dass der Maskenrahmen nach unten zeigt.



Ziehen Sie das Kopfband über den Kopf, sodass die Silikonauflage auf Ihrer Stirn anliegt.



Greifen Sie die unteren Bänder an den Seiten des Maskenrahmens und ziehen Sie die Bänder nach unten und zur Seite hin fest. Vergewissern Sie sich, dass die Silikonauflage auf Ihrer Nase anliegt und dass das blaue obere Band über Ihre Stirn verläuft.



Ziehen Sie die Kopfbandbänder des Kopfbands der Maske vorsichtig fest, indem Sie zuerst die blauen Stirnbänder und anschließend die unteren Bänder festziehen.

BESTELLNUMMERN FÜR NORDAMERIKA/ASIEN-PAZIFIK

MASKEN

ESN2SA	ESON2 – klein	400ESN221	ESON2 Kopfband – klein
ESN2MA	ESON2 – mittel	400ESN222	ESON2 Kopfband – mittel/groß
ESN2LA	ESON2 – groß	400ESN231	ESON2 Maske (ohne Kopfb.) – klein
		400ESN232	ESON2 Maske (ohne Kopfb.) – mittel
		400ESN233	ESON2 Maske (ohne Kopfb.) – groß
		400FPH241	F&P Drehgelenk 2
		400ESN251	ESON2 Clips
		400ESN261	ESON2 Luftverteiler
		400ESN271	ESON2 Winkelstück

ERSATZTEILE

400ESN211	ESON2 Dichtung – klein
400ESN212	ESON2 Dichtung – mittel
400ESN213	ESON2 Dichtung – groß

BESTELLNUMMERN FÜR ALLE ANDEREN REGIONEN

MASKEN

ESN2SU	ESON2 – klein	400ESN221	ESON2 Kopfband – klein
ESN2MU	ESON2 – mittel	400ESN222	ESON2 Kopfband – mittel/groß
ESN2LU	ESON2 – groß	400FPH241	F&P Drehgelenk 2
		400ESN251	ESON2 Clips
		400ESN261	ESON2 Luftverteiler
		400ESN271	ESON2 Winkelstück

ERSATZTEILE

400ESN211	ESON2 Dichtung – klein
400ESN212	ESON2 Dichtung – mittel
400ESN213	ESON2 Dichtung – groß