




---

## BlueNight® Acor+.

### Die drahtlose Lösung zum 6-Minuten-Gehtest.

---

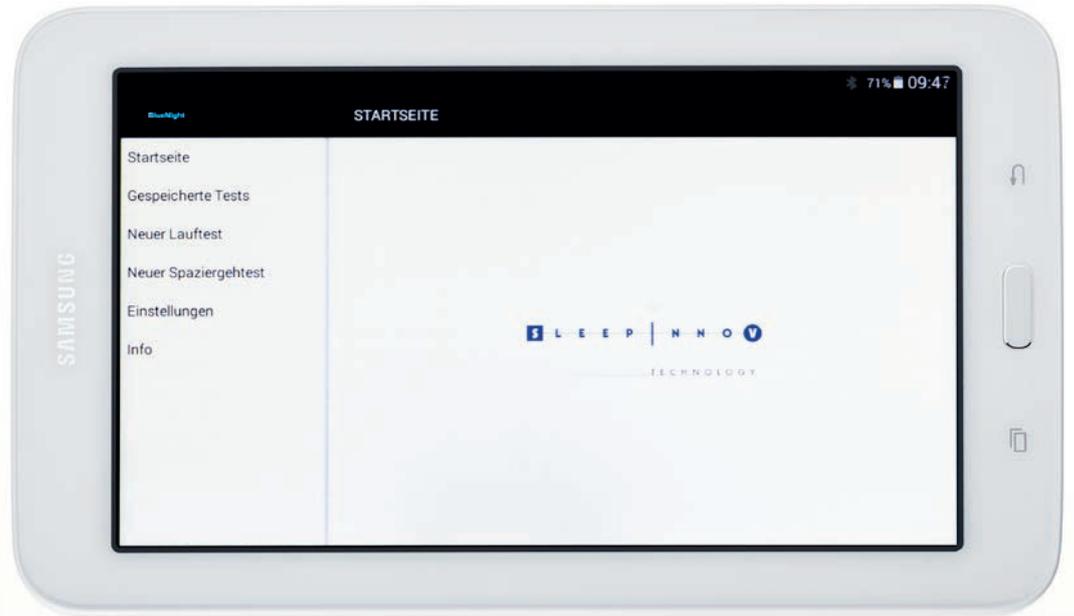

#### **Das ambulante System zur kabellosen Aufzeichnung der Patientenmobilität.**

Über eine Bluetooth-Verbindung kann die Aufzeichnung eines Gehstests kabellos über das dazugehörige Tablet verfolgt werden. Jederzeit werden Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung aufgezeichnet und bieten dem Anwender die simultane Beobachtung des Patienten und der dazugehörigen Daten. Die Einstellung der Sauerstofffluss- oder Bolusrate vor oder während der Untersuchung ermöglichen die Dokumentation des Untersuchungsverlaufs.

Die äußeren Bedingungen, wie die Länge der Gehstrecke oder Gehhilfen können ebenso wie zusätzliche Bemerkungen im Test verankert und dokumentiert werden.

Zusätzlich wird in der Anwendung des 6-Minuten-Gehtests die Atemnotmessung anhand der VAS-Skala oder der Borg-Skala abgefragt.

Das System bietet die Möglichkeit der Eingabe der Patienten und Anwenderdaten vor der Untersuchung am Tablet, oder die spätere Eingabe am Computer über die dazugehörige Software.

Nach der Übertragung der Testergebnisse auf den PC, steht nach wenigen Klicks eine unmittelbare Auswertung der Testdaten als DOC oder PDF-Dokument zur Speicherung in der Patientenakte oder zum Ausdruck zur Verfügung.

Als zusätzlicher Benefit ist es problemlos möglich aktuelle Testergebnisse mit früheren Ergebnissen zu vergleichen und somit einen Verlauf der Ergebnisse optisch und tabellarisch darzustellen.

---



# BlueNight® Acor+.

## Die drahtlose Lösung zum 6-Minuten-Gehtest.

### Nonin Wrist OX<sub>2</sub> 3150

- Bluetooth® 2.0 Wireless Technology
- Sättigungsbereich: 0–100 %
- Pulsbereich: 18–321 Schläge pro Minute
- Genauigkeit Sauerstoffsättigung: 70–100 % +/-2 % bei Erwachsenen
- Puls: +/-3 %
- Batterien: 2 AAA Batterien 1,5 V

### Samsung Galaxy Tab A6

- Betriebssystem Android 5.1.1
- 8 GB Gesamtspeicher
- Übersichtliches 7 Zoll Display
- Leichte 283 Gramm

### Software-CD

- Installation- und Auslesesoftware
- Handbücher



### Gerät und Zubehörliste

- H2008535 BlueNight® Acor komplettes Set
- H2006626 Fingersensor Silikon, gross
- H2006282 Ohrclip-Sensor
- H2006627 Pulsoximeter Nonin Wrist OX<sub>2</sub> inkl. Silikon-Sensor
- H2008563 Armband Wrist OX

Vertrieben durch:

Linde Gas Therapeutics GmbH  
Linde Healthcare, Mittenheimer Straße 62, 85764 Oberschleißheim  
Telefon (089) 37000-0, Fax (089) 37000-37300, www.linde-healthcare.de

Hersteller:  
SleepInnov Technology  
38430 Moirans  
Frankreich